



ІНСТРУКЦІЯ

РОЗУМНІ ВАГИ ПІДЛОГОВІ

NEOR FITLIFE 30BT WT

ЗМІСТ

1. Заходи безпеки та застереження
2. Зовнішній вигляд та опис
3. Розпакування
4. Перше використання
5. Експлуатація
6. Очищення
7. Зберігання
8. Гарантійне обслуговування
9. Технічні характеристики

1. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Будь ласка, уважно прочитайте «Заходи безпеки» перед використанням розумних ваг, і використовуйте їх належним чином, щоб уникнути пошкоджень або небезпеки викликані неправильним використанням.

1. Температура в приміщеннях, де користуються вагами, повинна бути в діапазоні від +5°C до +40°C.
2. Якщо є механічна чи електронна несправність, будь ласка, не використовуйте ваги, а зверніться до місцевого продавця або сервісного центру.
3. Не використовуйте ваги у дуже вологих і високотемпературних приміщеннях і не використовуйте їх біля предметів опалення (таких як електроопалення, печі, відкриті джерела вогню).
4. Не занурюйте ваги у воду та уникайте потрапляння рідини на ваги.
5. Якщо ваги вийшли з ладу, будь ласка, зверніться до сервісного центру.
6. Забороняється самостійно ремонтувати ваги. Не розбирайте їх самостійно, при виникненні будь-яких несправностей, зверніться до авторизованого (уповноваженого) сервісного центру.

2. ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ТА ОПИС



1. Платформа для зважування із загартованого скла
2. Електроди
3. Сенсорні кнопки
4. Цифрове табло
5. Руків'я з електродами

3. РОЗПАКУВАННЯ

Після транспортування або зберігання ваг при зниженій температурі необхідно витримати їх при кімнатній температурі не менше двох годин. Повністю розпакуйте ваги та видаліть будь-які наклейки, що заважають роботі. Перевірте цілісність ваг та їх компонентів, за наявності пошкоджень не користуйтеся пристроєм.

4. ПЕРШЕ ВИКОРИСТАННЯ


Перед першим використанням, переконайтеся, в правильності встановлення елементів живлення і що їхній формат та характеристики відповідають вказаним.

5. ЕКСПЛУАТАЦІЯ

1. Встановіть ваги на рівну, тверду та суху поверхню.
2. Підключіть руків'я з електродами до вагів за допомогою USB- кабелю.




3. Вказати параметри користувача відбувається за допомогою сенсорних кнопок на вагах або в застосунку AiLink на смартфоні. На вагах можна вказати 10 користувачів та їх характеристики (вік, зріст, стать) за допомогою сенсорних кнопок. Натисніть на кнопку SET, щоб обрати порядковий номер користувача від P0 до P9 за допомогою сенсорних кнопок збільшення / зменшення:

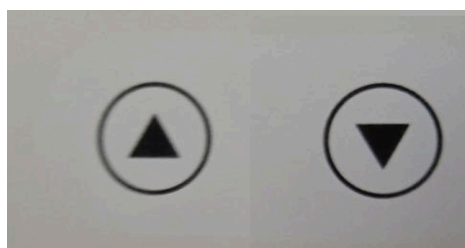

Подальше натискання на кнопку SET переходить до пункту стать, вік та зріст.

4. Станьте на ваги босоніж та тримайте руків'я з електродами як показано на малюнку.

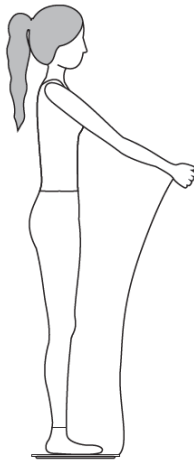

5. На дисплеї з'являться миготливі символи <0> – це означає початок вимірювання. Після завершення вимірювання інформація буде відображена на дисплеї.
6. Ваги автоматично вимкнуться після завершення зважування.

Підключення до застосунку AiLink.

Ваги працюють з додатком Ailink, який можна завантажити в App Store (iOS) або Google Play. Або скористайтесь QR-кодом для завантаження.



Цей додаток підтримує підключення різних електронних пристроїв. Після завантаження додатка, пройдіть реєстрацію.

Перш ніж підключатися до додатка, станьте на ваги (щоб увімкнути їх), відкрийте додаток, натисніть додати пристрій, почнеться пошук пристрою, додайте ваги. Налаштуйте свій профіль вказавши псевдонім, день народження, стать, зріст. Знову станьте на ваги босоніж і візьміться обома руками за ручки. На дисплеї з'являться миготливі символи <0> – це означає початок вимірювання. Тримайтеся за обидві ручки після того, як на екрані з'явиться вага. Не сходьте з платформи, поки символи <0> повністю не зникнуть.

Якщо з'являється помилка Err1, це може свідчити про поганий контакт електродів з підшвами. Переконайтесь, що ви стоїте босоніж і правильно

розташували стопи. Перевірте чи є з'єднання телефона з вагами. Якщо проблема не зникає, можливо, заважають мозолі – спробуйте зволожити стопи. Коли на світлодіодному екрані відображається «LO», слід встановити нові елементи живлення, якщо відображається «Err», це означає, що перевищено максимально допустиму вагу 180 кг.

6. ОЧИЩЕННЯ

1. Дістаньте елементи живлення.
2. Протріть ваги злегка вологою серветкою.

7. ЗБЕРІГАННЯ

1. Дістаньте елементи живлення.
2. Зберігайте ваги у сухому місці при кімнатній температурі.
3. Зберігайте ваги у недоступному для дітей і людей з обмеженими можливостями місці.
4. При тривалому зберіганні бажано зберігати ваги у фабричному пакуванні.

8. ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Термін служби виробу 3 роки. Гарантійний термін становить 1 рік. Після закінчення строку служби виробу виробник не несе відповідальності за безпечну роботу виробу, а також за заподіяння шкоди здоров'ю чи майну. Гарантійний термін обслуговування вказано у гарантійному талоні. Виробник не несе відповідальності за всі пошкодження і збиток, спричинені недотриманням вказівок з техніки безпеки та технічного обслуговування.

Насамперед це поширюється на:

- використання виробу не за призначенням
- технічні зміни виробу
- непрямі збитки внаслідок подальшого використання виробу з несправними деталями
- корозійні пошкодження та інші наслідки неправильного зберігання
- пошкодження внаслідок застосування неоригінальних запчастин
- пошкодження внаслідок робіт з техобслуговування та ремонту, які здійснювалися неуповноваженими спеціалістами

9. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назва приладу	Розумні ваги підлогові NEOR FITLIFE
Модель приладу	30BT WT
Максимально допустима вага	180 Кг
Матеріал корпусу	ABS, загартоване скло, метал
Розмір виробу	300 x 300 x 24 мм
Розміри пакування	425 x 340 x 40 мм
Напруга живлення	4x 1,5 В
Комплект постачання	Ваги — 1 од., гарантійна картка — 1 од., кабель USB — 1 од., руків'я з електродами — 1 од., батарейки типу AAA – 4 од.

Офіційний представник в Україні: ТОВ “КРЕО СІНЕРЖІ”

Адреса: 41600, Україна, Сумська обл., м. Конотоп, вул. Успенсько-Троїцька 37а

Виробник: Zhongshan Frecom Electronic Co., Ltd

Адреса: 3/F, Building 1, No.13 Xiangfu Rd., Torch Hi-tech Industrial Development Zone, Zhongshan City, China