

ІНСТРУКЦІЯ



**РОЗУМНІ ВАГИ
ПІДЛОГОВІ**

NEOR FITLIFE 36BT GR

ЗМІСТ

1. Заходи безпеки та застереження
2. Зовнішній вигляд та опис
3. Розпакування
4. Перше використання
5. Експлуатація
6. Очищення
7. Зберігання
8. Гарантійне обслуговування
9. Технічні характеристики

1. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Будь ласка, уважно прочитайте «Заходи безпеки» перед використанням розумних ваг, і використовуйте їх належним чином, щоб уникнути пошкоджень або небезпеки викликані неправильним використанням.

1. Температура в приміщеннях, де використовуються ваги, повинна бути в діапазоні від +5°C до +40°C.
2. Якщо є механічна чи електронна несправність, будь ласка, не використовуйте ваги, а зверніться до місцевого продавця або сервісного центру.
3. Не використовуйте ваги у дуже вологих і високотемпературних приміщеннях і не використовуйте їх біля предметів опалення (таких як електроопалення, печі, відкриті джерела вогню).
4. Не занурюйте ваги у воду та уникайте потрапляння рідини на ваги.
5. Якщо ваги вийшли з ладу, будь ласка, зверніться до сервісного центру.
6. Забороняється самостійно ремонтувати ваги. Не розбирайте їх самостійно, при виникненні будь-яких несправностей, зверніться до авторизованого (уповноваженого) сервісного центру.

2. ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ТА ОПИС



1. Руків'я з електродами
2. Цифрове табло
3. Платформа для зважування з електродами

3. РОЗПАКУВАННЯ


Після транспортування або зберігання ваг при зниженій температурі необхідно витримати їх при кімнатній температурі не менше двох годин. Повністю розпакуйте ваги та видаліть будь-які наклейки, що заважають роботі. Перевірте цілісність ваг та їх компонентів, за наявності пошкоджень не користуйтеся пристроєм.

4. ПЕРШЕ ВИКОРИСТАННЯ

Перед першим використанням, переконайтеся, в правильності встановлення елементів живлення і що їхній формат та характеристики відповідають вказаним.

5. ЕКСПЛУАТАЦІЯ

1. Встановіть ваги на рівну суху поверхню.
2. Під'єднайте ваги до застосунку AiLink на смартфоні.
3. Встаньте на ваги та тримайте руків'я з електродами як показано на малюнку.

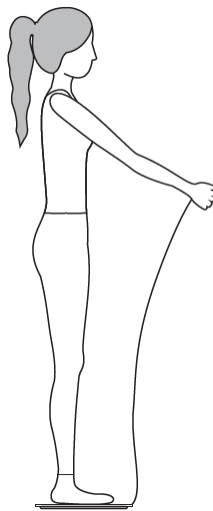

4. Зачекайте доки інформація завантажиться до застосунку.
5. Ваги автоматично вимкнуться після завершення зважування.

Підключення до застосунку AiLink.

Ваги працюють з додатком Ailink, який можна завантажити в App Store (iOS) або Google Play. Або скористайтесь QR-кодом для завантаження.



Цей додаток підтримує підключення різних електронних пристроїв. Після завантаження додатка, пройдіть реєстрацію.

Перш ніж підключатися до додатка, станьте на ваги (щоб увімкнути їх), відкрийте додаток, натисніть додати пристрій, почнетесь пошук пристрою, додайте ваги. Налаштуйте свій профіль вказавши псевдонім, день народження, стать, зріст. Знову станьте на ваги босоніж і візьміться обома руками за ручки. На дисплеї з'являться миготливі символи <0> – це означає початок вимірювання. Тримайтеся за обидві ручки після того, як на екрані з'явиться вага. Не сходьте з платформи, поки символи <0> повністю не зникнуть.

Якщо з'являється помилка Err1, це може свідчити про поганий контакт електродів з підошвами. Переконайтесь, що ви стоїте босоніж і правильно розташували стопи. Перевірте чи є з'єднання телефону з вагами. Якщо проблема не зникає, можливо, заважають мозолі – спробуйте зволожити стопи.

Коли на світлодіодному екрані відображається «LO», слід встановити нові елементи живлення, якщо відображається «Err», це означає, що перевищено максимально допустиму вагу 180 кг.

6. ОЧИЩЕННЯ

1. Дістаньте елементи живлення.
2. Протріть ваги злегка вологою серветкою.

7. ЗБЕРІГАННЯ

1. Дістаньте елементи живлення.
2. Зберігайте ваги у сухому місці при кімнатній температурі.
3. Зберігайте ваги у недоступному для дітей і людей з обмеженими можливостями місці.
4. При тривалому зберіганні бажано зберігати ваги у фабричному пакуванні.

8. ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Термін служби виробу 3 роки. Гарантійний термін становить 1 рік. Після закінчення строку служби виробу виробник не несе відповідальності за безпечну роботу виробу, а також за заподіяння шкоди здоров'ю чи майну. Гарантійний термін обслуговування вказано у гарантійному талоні. Виробник не несе відповідальності за всі пошкодження і збиток, спричинені недотриманням вказівок з техніки безпеки та технічного обслуговування.

Насамперед це поширюється на:

- використання виробу не за призначенням
- технічні зміни виробу
- непрямі збитки внаслідок подальшого використання виробу з несправними деталями
- корозійні пошкодження та інші наслідки неправильного зберігання
- пошкодження внаслідок застосування неоригінальних запчастин
- пошкодження внаслідок робіт з техобслуговування та ремонту, які здійснювалися неуповноваженими спеціалістами

9. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назва приладу	Розумні ваги підлогові NEOR FITLIFE
Модель приладу	36BT GR
Максимально допустима вага	180 Кг
Матеріал корпусу	ABS, метал
Розмір виробу	300 x 300 x 40 мм
Розміри пакування	380 x 410 x 55 мм
Напруга живлення	4 x 1,5 Вт
Комплект постачання	Ваги — 1 од., гарантійна картка — 1 од., батареї типу AAA – 4 од.

Офіційний представник в Україні: ТОВ “КРЕО СІНЕРЖІ”

Адреса: 41600, Україна, Сумська обл., м. Конотоп, вул. Успенсько-Троїцька 37а

Виробник: Zhongshan Frecom Electronic Co., Ltd

Адреса: 3/F, Building 1, No.13 Xiangfu Rd., Torch Hi-tech Industrial Development Zone,
Zhongshan City, China